

HYUNDAI

Quality and precision scale
HHE141801

HANDLEIDING Body analysis scale

INTRODUCTIE

De Hyundai-lichaamsweegschaal is geschikt voor het meten van al uw lichaamsstatistieken, welke van belang zijn voor een gezonde levensstijl. Lees de handleiding aandachtig door om te weten hoe u de weegschaal gebruikt. Op deze manier kunt u altijd up-to-date zijn van al uw lichaamsmetingen!

Hoe de weegschaal te gebruiken

Het apparaat heeft een zeer gevoelige sensor. Als u de instellingen wilt aanpassen, raakt u eenvoudig de knoppen met uw vinger aan. Als het apparaat niet reageert als u het aanraakt, maakt u het glazen oppervlak schoon met een zachte, droge doek.

De weegschaal is in de fabriek ingesteld met de eenheden "kg" en "cm".

Ga als volgt te werk om de instellingen te wijzigen in "lb" of "st" en "Ft: in":

- Schakel de weegschaal in door voorzichtig op het glasoppervlak te drukken met je voet of teen.
- Druk op de knop OMHOOG totdat de gewenste gewichtseenheid wordt weergegeven. De eenheid voor de hoogte verandert ook automatisch.

Weegfunctie

- Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond (vermijd tapijten). Een ongelijkmatige vloer draagt bij aan onnauwkeurige metingen.
- Ga met beide voeten op de weegschaal staan. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld.
- Verdeel uw gewicht gelijkmatig en wacht op de weegschaal om uw gewicht te bepalen.
- De cijfers op het display knipperen voordat uw exacte gewicht wordt getoond.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld 10 seconden nadat u van de weegschaal bent gestapt.
- Om een vooraf ingestelde persoon te kiezen of personen toe te voegen, drukt u op "set" en volgt u de instructies op het display.

SCHERM INFORMATIE




Analysebalk:

- Extreem ondergewicht
- Ondergewicht
- Normaal gewicht
- Overgewicht
- Zwaarlijvig

De weegschaal schoonmaken

- Dompel de weegschaal niet onder in water: de elektronische componenten kan beschadigd zijn.
- Gebruik geen staalborstel of schurende items.
- Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een licht vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen vocht of water in het apparaat sijpelt!
- Gebruik een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel of zeep om te reinigen.
- Droog het apparaat goed na het reinigen met een droge en zachte doek.

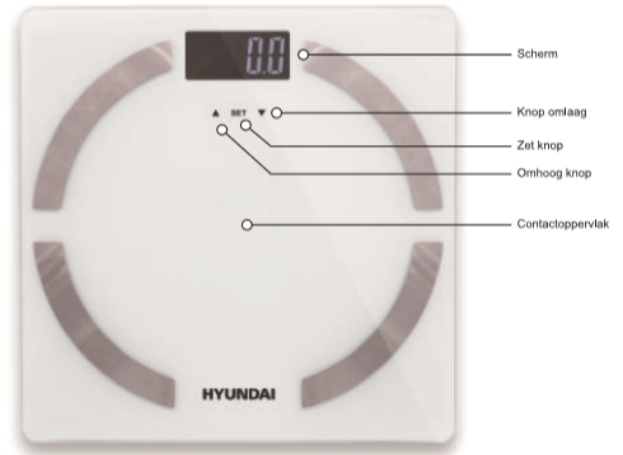

VOORZICHTIGHEID:

- Behandel de weegschaal voorzichtig, want het is een nauwkeurig meetinstrument. Laat het niet vallen of spring erop.
- Laadt het apparaat niet met meer dan 180 kg om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Bewaar de weegschaal alleen in een horizontale positie als ze worden gedragen of niet worden gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Product description:	Hyundai body analysis weegschaal
Modelnummer:	HHE141801
Materiaal:	gehard glas + ABS + roestvrij stalen elektroden
Kleur van het glas:	Wit
Afmeting van het product:	30 x 30 x 1,7 cm
Gewicht:	1,4 kg
LCD-formaat / kleur:	75 x 35 mm / blauwe of witte LED-achtergrondverlichting
Batterij:	2 x 1.5V AAA-batterijen (niet inbegrepen)
Capaciteit:	Maximaal gewicht 180kg / 396lb
Gewichtseenheid:	Kg / lbs / st
Geheugenfunctie:	tot 10 personen
Analyse:	Gewicht, lichaamsvet, lichaamswater, spier, botmassa, BMI en calorieën
Indicator:	Overbelastingsindicator, indicator voor laag vermogen

Voor u op de weegschaal gaat staan, moet u eerst uw gegevens ingeven.

Druk daarvoor op SET en gebruik de pijltjes op P1 te kiezen (Persoon 1).

Druk dan nog eens op SET om uw keuze te bevestigen.

Geef vervolgens uw gegevens in met de pijltjes: uw geslacht, uw leeftijd en uw lengte (in cm). Druk telkens op SET om uw keuze te bevestigen.

Eenmaal u dit heeft ingegeven, gaat u onmiddellijk met blote voeten op de weegschaal staan, waarbij u ervoor zorgt dat uw voeten op de metalen plaatjes staan. Eerst wordt het gewicht getoond, dan het lichaamsvet, het water in uw lichaam, de spiermassa, het gewicht van uw beenderen, BMI en als laatste uw basaal metabolisme.

Indien de weegschaal uit staat, kunt u op set duwen om opnieuw P1 te kiezen. Dan moet u nog eens al uw gegevens bevestigen door telkens op SET te duwen. U kunt dit doen terwijl u reeds op de weegschaal staat. Daarna worden alle info's getoond zoals hierboven beschreven.

U kunt andere personen op dezelfde manier ingeven door P2, 3, 4 enz. te kiezen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VERWIJZING,
ZIE BELANGRIJKE INFORMATIE.

BATTERIJ WAARSCHUWING:

- Meng geen oude en nieuwe batterijen.
- Meng geen alkalische, standaard (karton-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Sluit de voedingsklem niet kort.
- Verwijder de batterijen wanneer u ze niet gebruikt. Recycle of gooi lege batterijen weg volgens de lokale wetgeving. Gooi batterijen niet in het vuur - ze kunnen lekken of exploderen.

VOOR VRAGEN OF ONDERSTEUNING KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be

© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai logo's zijn handelsmerken van Hyundai Corporation, Korea.
Licentie verleend aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. Exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT IN AANVRAAG

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of auteursrechtvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

Gelicenseerd door HYUNDAI Corporation, Korea